



Patients Damon[™].
Photos fournies par le Dr. Ramón Perera.

DÉCIDEZ DE VOTRE TRAITEMENT, EN TOUTE LIBERTÉ

Lancement de la 8^e génération de
brackets Damon[™], inspirée de l'expertise
des orthodontistes du monde entier.



DAMON[™] **2**

FIABILITÉ. POLYVALENCE. SIMPLICITÉ.

Fruit de 20 ans d'innovations inspirées par les orthodontistes du monde entier, la 8^e génération de brackets Damon a vu le jour : **Damon™ Q2**. Ce système, qui allie des brackets autoligaturants passifs, des séquences d'arcs de force faible et des protocoles de traitement recommandés, a déjà fait ses preuves en traitant des millions de patients.



Damon™ SL
1996



Damon™ 2
2001



Damon™ 3
2004



Damon™ 3MX
2005



Fiable et pratique grâce à de larges espaces sous les ailettes et un meilleur contrôle rotationnel, **Damon™ Q2 offre une polyvalence inégalée. Il permet de traiter efficacement TOUS vos cas à l'aide de mécaniques simplifiées**



Damon™ Q
2008



Damon™ Clear
2009



Damon™ Clear2
2014



Damon™ Q2
2017



DÉCIDEZ DE VOTRE TRAITEMENT, EN TOUTE LIBERTÉ


FIABLE. FACILE D'UTILISATION.

L'ouverture et la fermeture des brackets Damon Q2 sont faciles grâce à la glissière coulissante brevetée **Spintek™** qui permet des changements d'arcs rapides et confortables pour le patient tout au long du traitement.



FACILE À OUVRIR

Pour ouvrir, insérer l'extrémité plate de l'instrument Spintek™ dans la fente d'ouverture et tourner d'un quart de tour. Aucune force n'étant exercée sur la dent, le patient ne ressent aucune gêne au moment de l'ouverture des brackets.

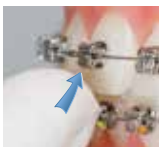

FACILE À FERMER

Pour fermer, repousser la glissière Spintek™ à l'aide de votre doigt ou de l'instrument. Attendez de sentir le clic qui vous garantira la fermeture complète de la porte.

POLYVALENT. PRATIQUE.



Grâce à de larges espaces sous les ailettes, ce bracket s'adapte à tous types de chaînettes, d'élastiques, de ligatures en acier et autres auxiliaires, offrant de nombreuses possibilités de traitement.



Ce **bracket de petite taille au profil réduit** a des contours lisses et arrondis qui garantissent au patient un confort optimal.

Comparaison
de
Damon™ Q et
Damon™ Q2



Damon™ Q



Damon™ Q2



La **base arrondie** et le **nouveau repère vertical** facilitent le positionnement du bracket.



Les **crochets amovibles*** ou **permanents** (option) ont été renforcés pour résister durablement aux tractions exercées par les élastiques et autres auxiliaires Ormco. Ajouter la référence des crochets amovibles Damon Q2 : Crochet amovible pour bracket Damon Q2(30) : 242-0037

* Les crochets amovibles Damon™ Q actuellement disponibles (242-0114) sont compatibles avec les brackets Damon™ Q2.

EFFICACE. PRÉCIS.


Ses 4 parois solides et son slot haute précision de 022x.0275 offrent **2 fois plus de contrôle de la rotation**** pour une qualité de finition supérieure.



** 2 fois plus de contrôle de la rotation sup. 3-3 par rapport au bracket DQ original.

FIABLE. RÉSISTANT.

Sa **base en treillis de calibre 80** assure une force d'adhésion fiable tout au long du traitement ainsi qu'une dépose facile pour le praticien et confortable pour le patient.

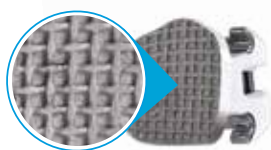

Conçu en **acier inoxydable 17-4 selon le procédé MIM** Damon Q2 est extrêmement solide.



COMPLET. FLEXIBLE.

Une large gamme d'arcs, d'auxiliaires, d'instruments et de matériaux de collage Damon™ est disponible pour vous aider dans la mise en œuvre des **protocoles de traitements** et **mécaniques de votre choix**.

Tubes & Brackets Damon™ Q2

MAXILLAIRE	type	torq.	ang.	.022G	.022D
Centrale	Faible	+2°	+5°	491-8863	491-8862
Centrale	Standard	+12°	+5°	491-8861	491-8860
Centrale	Elevé	+22°	+5°	491-8867	491-8866
Latérale	Faible	-5°	+9°	491-8873	491-8872
Latérale	Standard	+8°	+9°	491-8871	491-8870
Latérale	Elevé	+13°	+9°	491-8875	491-8874
Canine	Faible	-9°	+5°	491-8883	491-8882
Canine avec crochet	Faible	-9°	+5°	491-9883	491-9882
Canine	Standard	+7°	+5°	491-8881	491-8880
Canine avec crochet	Standard	+7°	+5°	491-9881	491-9880
Canine	Elevé	+11°	+5°	491-8885	491-8884
Canine avec crochet	Elevé	+11°	+5°	491-9885	491-9884
Prémolaires		-11°	+2°	491-8891	491-8890
Prémolaires - Base décalée		-11°	+2°	491-8991	491-8990
Prémolaires avec crochet		-11°	+2°	491-9891	491-9890
Prémolaires avec crochet - Base décalée		-11°	+2°	491-9991	491-9990
Prémolaires - à souder		-11°	+2°	161-8891	161-8890
MANDIBULAIRE	type	torq.	ang.	.022G	.022D
Centrale	Faible	-11°	+2°	491-8815	491-8814
Centrale	Std/Faible	-6°	+2°	491-8817	491-8816
Centrale	Standard	-3°	+2°	491-8811	491-8810
Latérale	Faible	-11°	+4°	491-8825	491-8824
Latérale	Std/Faible	-6°	+4°	491-8827	491-8826
Latérale	Standard	-3°	+4°	491-8821	491-8820
Canine	Faible	0°	+5°	491-8833	491-8832
Canine avec crochet	Faible	0°	+5°	491-9833	491-9832
Canine	Standard	+7°	+5°	491-8831	491-8830
Canine avec crochet	Standard	+7°	+5°	491-9831	491-9830
Canine	Elevé	+13°	+5°	491-8835	491-8834
Canine avec crochet	Elevé	+13°	+5°	491-9835	491-9834
1 ^{er} prémolaire	Standard	-12°	+4°	491-8841	491-8840
1 ^{er} prémolaire - Base décalée	Standard	-12°	+4°	491-8941	491-8940
1 ^{er} prémolaire avec crochet	Standard	-12°	+4°	491-9841	491-9840
1 ^{er} prémolaire avec crochet - Base décalée	Standard	-12°	+4°	491-9941	491-9940
1 ^{er} prémolaire - à souder	Standard	-12°	+4°	161-8841	161-8840
1 ^{er} prémolaire	Elevé	-5°	+4°	491-8843	491-8842
1 ^{er} prémolaire - Base décalée	Elevé	-5°	+4°	491-8943	491-8942
1 ^{er} prémolaire avec crochet	Elevé	-5°	+4°	491-9843	491-9842
1 ^{er} prémolaire avec crochet - Base décalée	Elevé	-5°	+4°	491-9943	491-9942
1 ^{er} prémolaire - à souder	Elevé	-5°	+4°	161-8843	161-8842
2 ^e prémolaire		-17°	+4°	491-8851	491-8850
2 ^e prémolaire - Base décalée		-17°	+4°	491-8951	491-8950
2 ^e prémolaire avec crochet		-17°	+4°	491-9851	491-9850
2 ^e prémolaire avec crochet - Base décalée		-17°	+4°	491-9951	491-9950
2 ^e prémolaire - à souder		-17°	+4°	161-8851	161-8850

Kits individuels pour patients Damon™ Q2

5-5 Sup./Inf. Kit individuel patient Damon™ Q2 : torque standard	740-1410
5-5 Sup./Inf. Kit individuel patient Damon™ Q2 : torque faible sup. 2-2	740-1411
5-5 Sup./Inf. Kit individuel patient Damon™ Q2 : torque élevé sup. 3-3, torque faible inf. 2-2	740-1412
7-7 Sup./Inf. Kit individuel patient Damon™ Q2* : torque standard	740-1413
7-7 Sup./Inf. Kit individuel patient Damon™ Q2* : torque faible sup. 2-2	740-1414
7-7 Sup./Inf. Kit individuel patient Damon™ Q2* : torque élevé sup. 3-3, torque faible inf. 2-2	740-1415

*Tubes Snaplink sur les 6 et Titane sur les 7

Auxiliaires Damon™ Q2

Crochets amovibles Damon™ Q2 (Sup./inf. 5-5), 30 par sachet	242-0037
Crochets amovibles Damon™ Q (Sup./inf. 5-5), 30 par sachet (compatible Damon™ Q2)	242-0114
Instrument d'ouverture SpinTek™ †	866-4014
Instrument d'ouverture/fermeture SpinTek™ †	866-4016
Pince pour décoller les brackets Damon Q et Q2	866-4008
Boîte de rangement Quad sticks	070-0160
Kit Grëngloo™ en seringues	740-0320
Kit Grëngloo™ en unidoses	740-0322

†Pour Damon™ Q, Damon™ Q2, Damon™ Clear, Damon™ Clear2, et tubes SnapLink™.

Le **système** d'appareils métalliques ou transparents est complètement **interchangeable** : Damon™ Q2 est parfaitement **compatible** avec les brackets **Damon™ Q** et **Damon™ Clear2**, ainsi qu'avec les tubes **SnapLink™**, **Accent™ Mini** et **Titane**.



Tubes

MAXILLAIRE	torq.	ang.	rot.	.022G	.022D
1 ^{er} molaire - Tube SnapLink™	-18°	0°	+12°	438-2161	438-2160
1 ^{er} molaire - Tube SL	-18°	0°	+12°	438-2103	438-2104
1 ^{er} molaire - Tube SL - à souder	-18°	0°	+12°	513-1243	513-1244
1 ^{er} molaire - Mini tube Accent™	-18°	0°	+12°	513-0163	513-0162
2 ^e molaire - Mini tube Accent™	-27°	0°	+6°	513-0171	513-0170
2 ^e molaire - Tube Titane	-27°	0°	+6°	449-1203	449-0203
2 ^e molaire - Tube Damon™ (acier inoxydable)	-27°	0°	+10°	438-2105	438-2106
MANDIBULAIRE	torq.	ang.	rot.	.022G	.022D
1 ^{er} molaire - Tube SnapLink™	-28°	+2°	+2°	438-2191	438-2190
1 ^{er} molaire	-28°	+2°	+2°	438-2101	438-2102
1 ^{er} molaire - Tube SL - à souder	-28°	+2°	+2°	513-1241	513-1242
1 ^{er} molaire - Mini tube Accent™	-28°	0°	+10°	513-0165	513-0164
2 ^e molaire - Mini tube Accent™	-10°	0°	0°	513-0173	513-0172
2 ^e molaire - Tube Titane	-10°	0°	+5°	449-2127	449-2027

Identification du bracket

L'ailette disto gingivale est marquée d'un point de couleur pour identifier chaque bracket. Un repère permanent conforme au système international d'identification ISO est gravé dans la gorge.

5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

Identification du torque

Vert : Torque faible **Bleu** : Torque standard **Rouge** : Torque élevé

Pour tous les brackets Damon™ - marquage dans la gorge : plus (+) = torque élevé, moins (-) = torque faible

Supports de formation et marketing

Modèles & Typodonts de consultation

Modèle de consultation Damon™ Q2 14X	717-0126
Typodont de consultation Damon™ Q2	717-0116

Brochure patient & porte-brochures

Brochure patients Damon™ (paquet de 20)	762-4923
Porte-brochures patient en forme de dent	762-4909

Présentations & produits dérivés

Album photo sur l'orthodontie Damon™ (à spirales)	762-6195
---	----------

DÉCIDEZ DE VOTRE FORMATION, EN TOUTE LIBERTÉ

Des symposiums internationaux aux cours In Office, en passant par les study group et les ateliers thématiques, le programme d'éducation varié et continu d'Ormco permet d'acquérir des connaissances de pointe en gestion clinique et pratique. Vous et vos patients pourrez ainsi tirer pleinement parti des avantages du système Damon™.



NOS CONFÉRENCES
EN FRANCE ET PARTOUT
DANS LE MONDE EN TEMPS RÉEL
SUR VOTRE SMARTPHONE //



RETROUVEZ NOTRE APPLICATION
ORMCO CONFÉRENCES
 DISPONIBLE EN TÉLÉCHARGEMENT SUR





A PROPOS D'ORMCO

Depuis plus de 50 ans, Ormco fournit aux professionnels de l'orthodontie des produits innovants de haute qualité. Les clés de notre succès : proposer une formation continue tout en assurant un service exceptionnel. Animés par la volonté de répondre toujours mieux aux besoins et attentes des orthodontistes, de leurs collaborateurs et de leurs patients, nous offrons des produits et services garantissant une expérience optimale.

Rendez-vous sur ormco.fr pour en savoir plus sur nos produits, les études de cas cliniques, les différents traitements ainsi que les cours et événements.

Le bracket Damon™ Q2 est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, indiqué pour le déplacement des dents dans le cadre d'un traitement orthodontique. BSI CE0086. Fabriqué par Ormco.

Ormco™

Immeuble Cap de Seine – 3^e étage
45-47 Boulevard Paul Vaillant Couturier
94200 IVRY SUR SEINE