


M

MEMOTAIN[®]

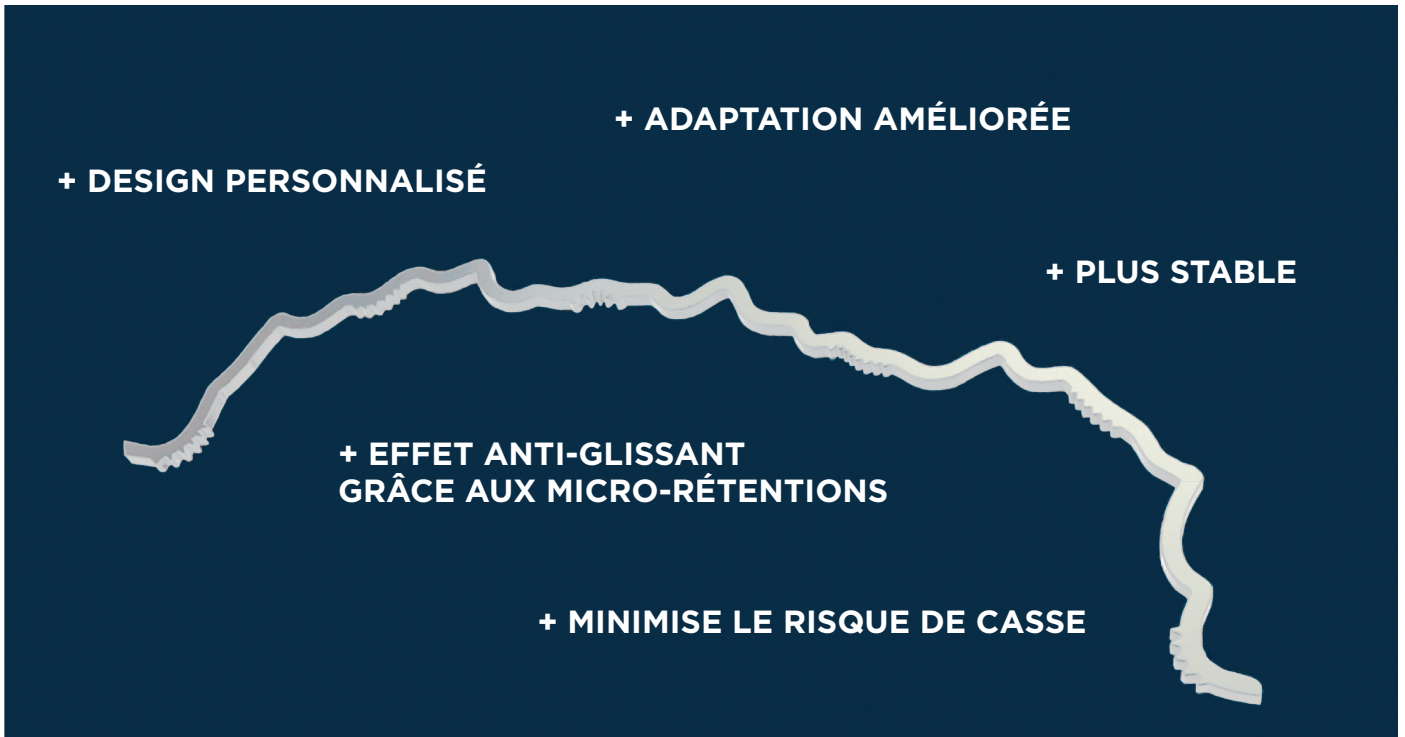

Nouvelle caractéristique:


Contention partielle - Ancrages pour améliorer la contention

**Difficulté liée au design
de la contention Memotain 1.0**

L'anatomie des dents rectilignes pouvait provoquer un "effet glissant" lequel entraînait la contention à glisser à travers le composite.

Solution Memotain 2.0

Les contentions partielles agissent comme un mini-ancrage qui évite le glissement sur le composite.

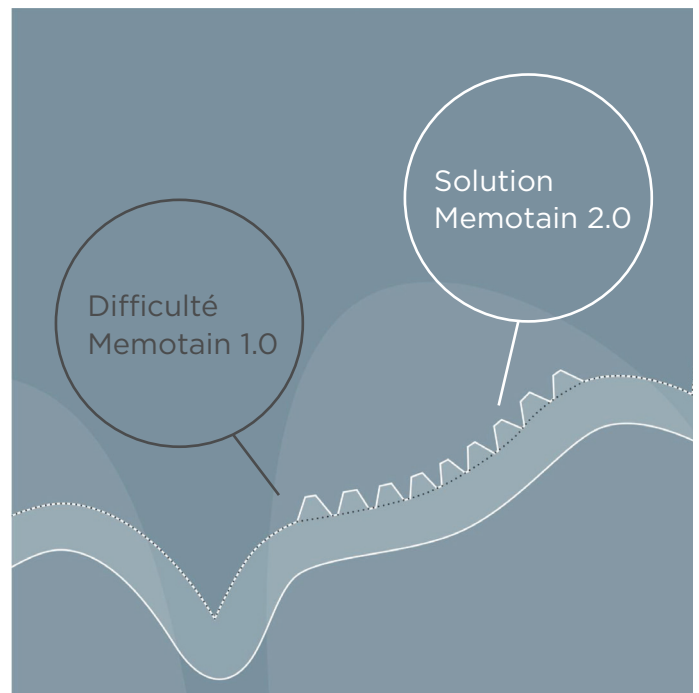

Nouvelle caractéristique:


Lissage partiel - Design personnalisé pour plus de stabilité

**Difficulté liée au design
de la contention Memotain 1.0**

Si les espaces interdentaires étaient trop étroits ou trop larges, cela pouvait conduire à moins de stabilité.

Solution Memotain 2.0

Le lissage partiel des surfaces interdentaires permet un design individualisé, interdentaire et partiel. Cela améliore la stabilité ainsi que l'adaptabilité.

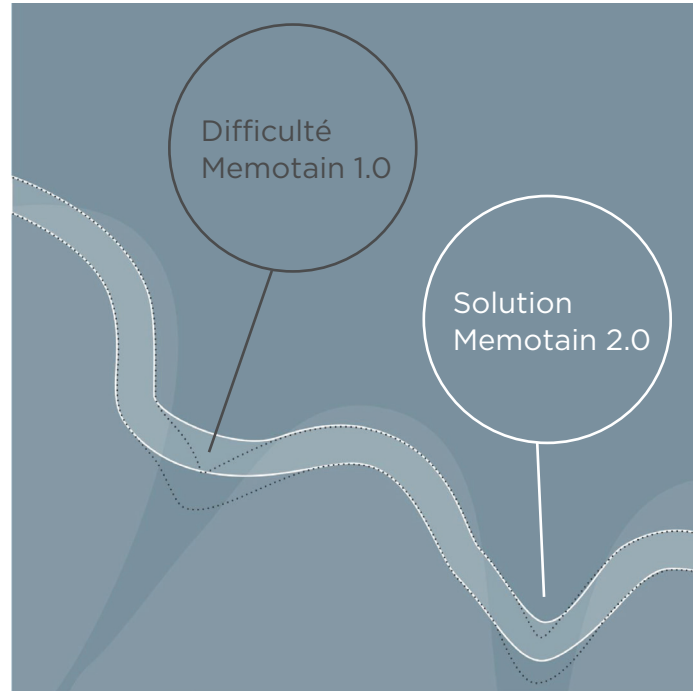

Nouvelle caractéristique:

Distance partielle - Plus d'espace pour la papille maxillaire

**Difficulté liée au design
de la contention Memotain 1.0**

Concevoir un dispositif de contention pour un patient ayant une papille maxillaire importante conduisait à des distances plus longues autour de la papille ou à la fabrication de la contention en 2 parties .

Solution Memotain 2.0

La distance partielle est une des nouvelles caractéristiques qui permet d'avoir un design plus adapté nécessitant moins d'espace autour du centre de résistance.

